



## テルモ社製ベネジェクトⅡ真空採血管の滅菌方法および管体表記内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社が供給していますテルモ社製の真空採血管につきまして下記の通り、変更案内がありましたのでご案内申し上げます。

謹白

### 記

#### <変更内容>

1. 滅菌方法の変更
2. 管体表記内容の変更

変更日

平成27年7月より順次変更

#### 1. 滅菌方法の変更

- ① 滅菌方法をガンマ線滅菌から電子線滅菌に変更いたします。
- ② これに伴い、包装表示を「ガンマ線滅菌済」から「電子線滅菌済」に変更いたします。
- ③ 滅菌方法を変更したことにより血清分離剤および血漿分離剤に微細な気泡が存在します。

(裏面参照)


気泡は、分離剤内に溶け込んでいた空気が、減圧状態で電子線に照射されることにより発生したものです。

※採血や開栓などにより平圧に戻ると気泡は消失します。

※検査データに影響はありません。

裏面につづきます

## 《《採血前の分離剤中の気泡と平圧時の消失例》》

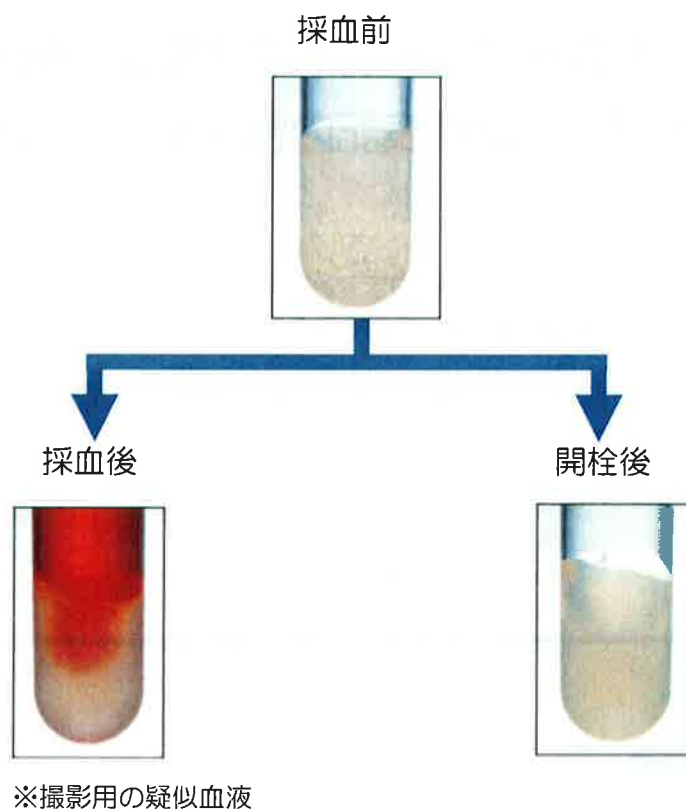

## 2. 管体表記内容の変更

- ① 使用期限の視認性向上のため、白文字で表記します。  
管周囲に5 mL 管、7 mL 管は3箇所、10 mL 管は2箇所に表記します。
- ② 採血量と品種記号の文字をわかりやすく大きく表記します。
- ③ 管理番号を追加します。管理番号は、製造した月日をレーザーにて刻印します。

